

eben

das ebenbild des fußes.



Orthopädische Einlegesohlen
Innovation 2026



Mit **eben** präsentiert Spannit den ersten Rohling, mit dem es möglich ist, nahezu jede Indikation zu versorgen.

Durch neu entwickelte Materialien in Verbindung mit modernsten Produktionstechniken entstand eine Produktreihe, die optimal bearbeitbar ist. Die eingesetzten Materialien lassen sich perfekt thermoplastisch verformen und beschleifen.

Das Ergebnis ist eine bislang **unerreichte Kombination aus Passform, Komfort, Funktionalität und Bearbeitbarkeit.**



Thermisch
verformbares
Polymer



Gut bearbeitbarer
Kern



Dauerhafte
Polster




Wenn Material den Unterschied macht

Material: PU-Material, offenzellig, ca. 16 Shore, Kern aus thermoplastischem Kunststoff, Unterdecke CoraPur


Aufbau: MEMOPUR® Schaum schwarz als durchgehende Weichbettung mit eingeschäumter Pelotte, extra Polster von ca. 2,5 mm im Vorfußbereich unter MFK 2-4 und im Fersenbereich als Fersenpunktpolster gearbeitet und zusätzlicher Freilegung der Plantarfascie

Besonderheiten: Neuentwickeltes, thermoplastisches Kernsystem in 3 unterschiedlichen Ausführungen, zur individuellen Unterstützung des Längsgewölbes. Leichte Fersenschale und Berücksichtigung der Basis 5. Thermoplastisch an jeden Fuß anpassbar.

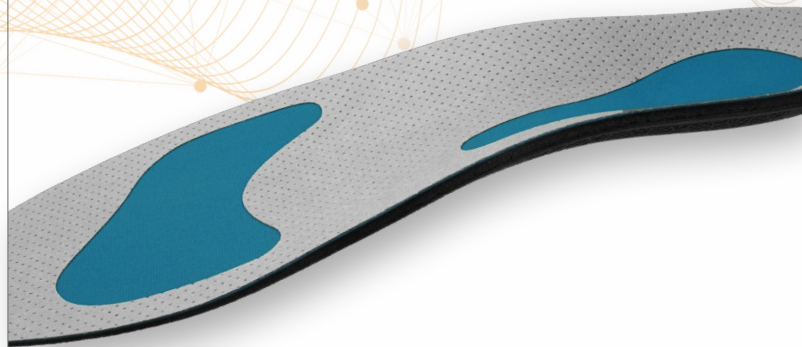

Art.-Nr. LZ9338C15E53Z0A15V011

Gr. 35-48

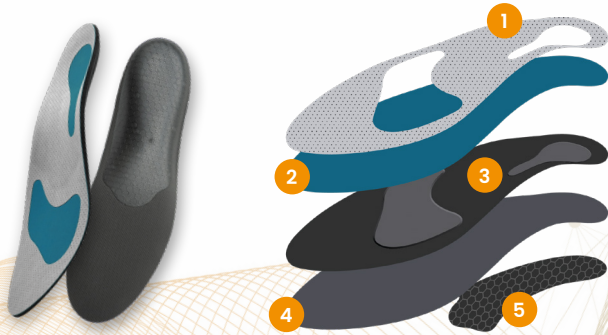


MODELL STÜTZEND/BETTEND

Geschlossener Kern mit maximaler Längsgewölbeunterstützung

Art.-Nr. LZ9338C15E52Z0A15V011 PAD

Gr. 35-48

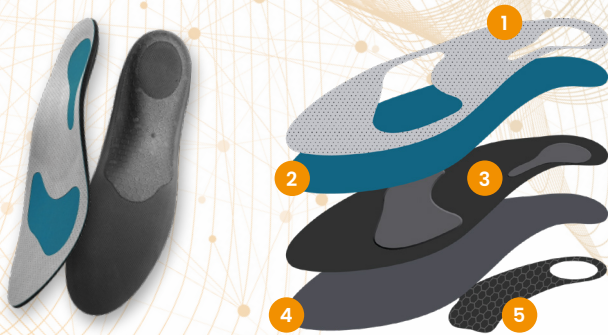


MODELL PAD

Kern mit PAD-Aussparung als Schockabsorber und moderater Längsgewölbeunterstützung

Art.-Nr. LZ9338C15E51Z0A15V011 FSP

Gr. 35-48

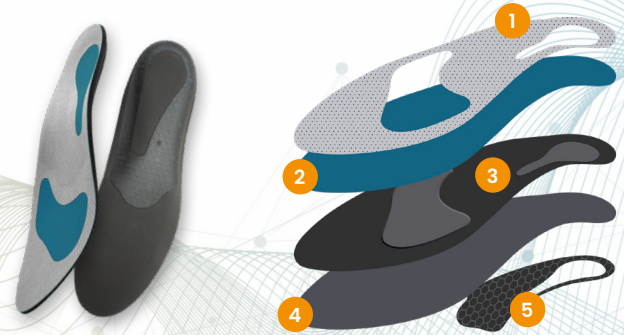


MODELL FSP

Kern mit aktivierbarer Fersensporen-Freilegung und leichter Längsgewölbeunterstützung

Art.-Nr. LZ9338C15D34Z0A15V011 Rigidus

Gr. 35-48

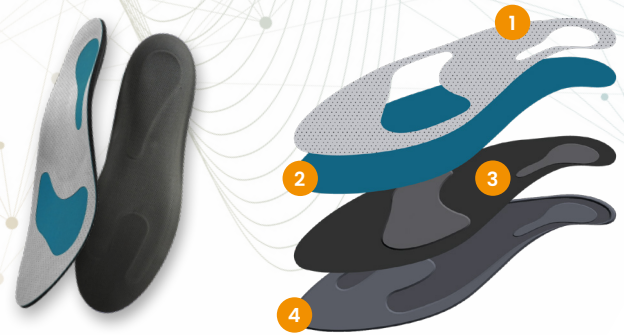

MODELL RIGIDUS

Rigidus-Kern mit lateraler Ausgleichsfeder und optionaler Fersensporenaussparung

1

Atmungsaktives, strapazierfähiges und antibakteriell wirkendes Oberdeckenmaterial

2

Neopur als Schutz der eingearbeiteten Vorfuß- und Fersenpolster

3

Durchgehende MEMOPUR® Schicht in 2,5 mm

4

Unterdeckenmaterial aus neuartigem, verdichtetem MEMOPUR® Schaum

5

Neuartiges thermoplastisches Kernsystem

eben

**Jetzt
Muster-Rohling
anfordern!**



SPANNRIT GmbH

Industriestraße 3

63801 Kleinostheim

Telefon: +49 6027 4064-0

Telefax: +49 6027 4064-20

E-Mail: info@spannrit.de

www.spannrit.net

